

最多可连续分配49次，无需重新加注。分配体积从2微升到5000微升。

## 特征

多分液吸管。

精密重复分配器。

适用于配制低粘度和高粘度液体。

专为快速分配而设计。

根据设置，分配器可以连续地最多排放49次，而不需要重新填充。

接受8种不同的注射器。

使用COMECTA注射器的精密工作台。（这些值是基于在环境温度下使用蒸馏水的每个吸量管的最大体积）：

Type syringe ml	Volume doses $\mu$ l	Precision nominal volume A $\leq \pm\%$		Variation coefficient nominal volume CV $\leq \%$	
		10%	2%	-10%	2%
0.5	10 - 50	0.8	4.0	0.6	1.4
1.25	25 - 125	0.8	4.0	0.3	0.8
2.5	50 - 250	0.7	3.5	0.2	0.8
5	100 - 500	0.5	2.5	0.2	0.6
12.5	250 - 1250	0.3	1.5	0.2	0.4
25	500 - 2500	0.3	1.5	0.2	0.4
50	1000 - 5000	0.3	1.5	0.15	0.4

## 配件

无菌注射器。单独包装。

Part No.	Volume ml	Syringes x part No.
5490053	0,5	100
5490054	1,25	100
5490055	2,5	100
5490056	5	100
5490057	12,5	50
5490058	25	50
5490059	50	50

根据使用的注射器，分配体积从2微升到5000微升。每个注射器的最大粘度为：

50 ml = 20 mPas, 5 ml = 260 mPas and 1.25 ml = 977 mPas.

最大压力：500 mbar.

操作温度：从 15 到 40 °C.


在分配器的背面显示了体积和剂量的快速参考表，显示了要使用的注射器的可重复剂量和正确的滑动位置。

包括易于定位的墙壁或工作台支架。

配有一个5毫升注射器和一个25毫升和50毫升注射器用高压灭菌聚丙烯适配器。

## 重复多分配器“Repette HW”.

Part No. 5490050

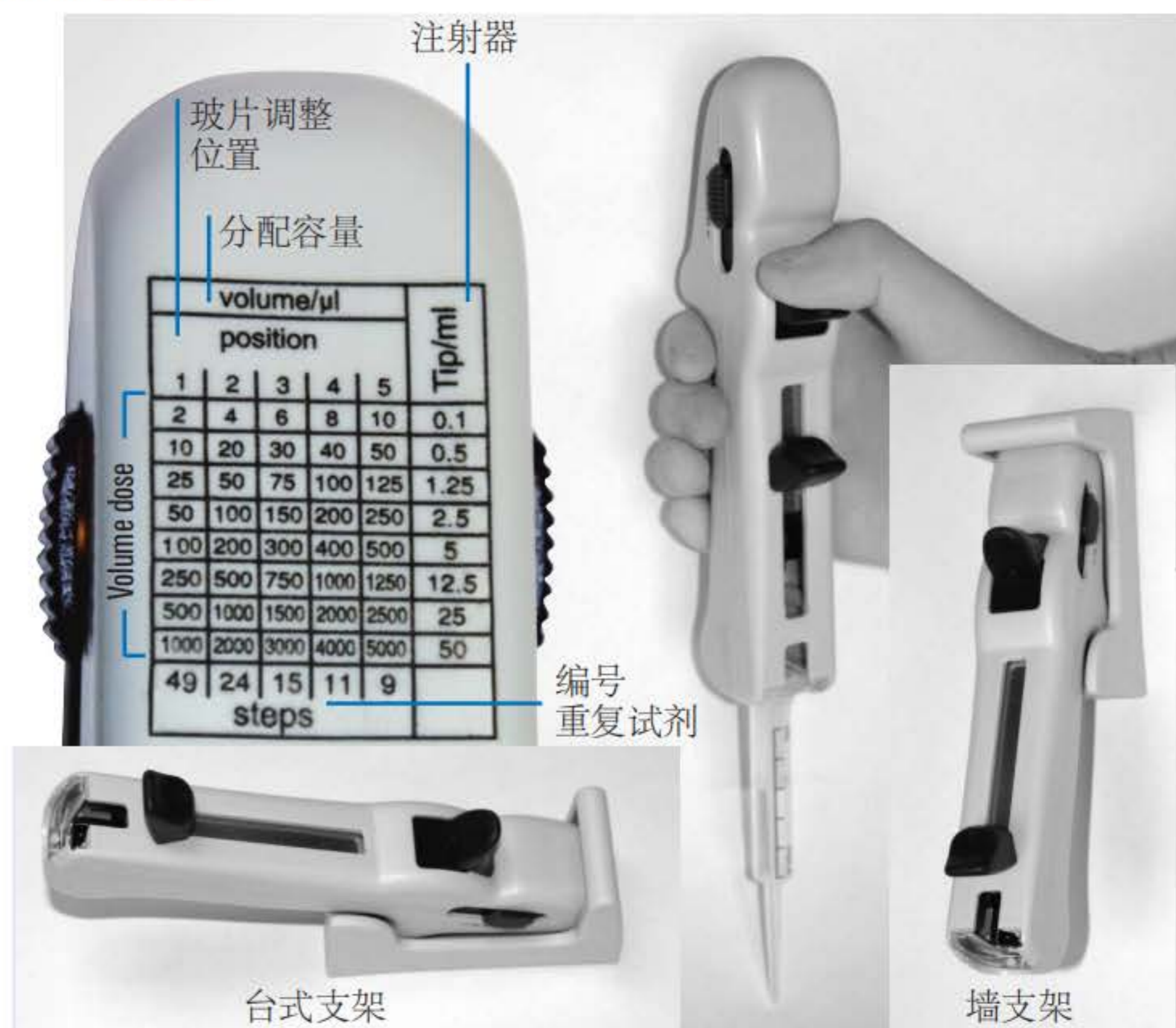

## 备件

8	5490060	聚丙烯适配器 注射器从 25 到 50 ml
---	---------	---------------------------